





MediVetCon

**Inteligentny wybór
lekarzy weterynarii**



DH36 Vet

Automatyczny weterynaryjny analizator morfologiczny 3-diff

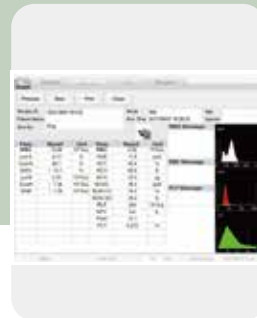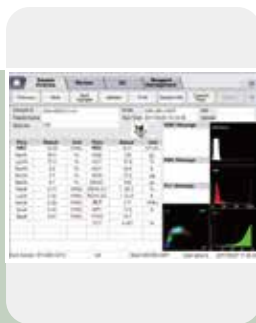

Dostępne gatunki to: kot, pies i królik

(możemy zdefiniować krowę, konia i owcę.)

Doskonała powtarzalność i szeroki zakres liniowości.

Wewnętrzna komora na odczynniki.

Wbudowana drukarka termiczna, obsługiwana drukarka zewnętrzna.

Dostosowane do Twoich potrzeb odczynniki w małych opakowaniach.

Parametry

19 parametrów: WBC, Gran#, Lym#, Mid#, Gran%, Lym%, Mid%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT

3 histogramy dla WBC, RBC i PLT

Zasada działania

Metoda impedancji dla testu WBC, RBC i PLT

Kolorymetria bez cyjanków dla testu HGB

Wydajność

Do 40 testów na godzinę

Pojemność próbki

17 μ l

Badanie

Tryb pełnej krwi i tryb wstępnie rozcieńczony

Pamięć

Do 50,000 wyników

Powtarzalność

WBC: $\leq 3.0\%$ ($4.00-15.00 \times 10^9/L$)

RBC: $\leq 2.0\%$ ($> 3.50 \times 10^{12}/L$)

HGB: $\leq 2.0\%$ (110-180g/L)

MCV: $\leq 1.0\%$ (70.0-1 IO.OfL)

PLT: dla psa $\leq 6.0\%$ ($100-500 \times 10^9/L$);

dla kota $\leq 10.0\%$ ($100-500 \times 10^9/L$)

Zakres liniowości

WBC: 0.00- $200 \times 10^9/L$

RBC: 0.00- $17.00 \times 10^{12}/L$

HGB: 0-250g/L

PLT: 0- $3000 \times 10^9/L$

HCT: 0.0-67%

Interfejs

10,4 calowy ekran dotykowy TFT

Komunikacja

Obsługuje dwukierunkowy LIS

Panel tylny

1 port USB, 1 port LAN

Wymiary

364mm(Szer.)x477mm(Gł.)x417mm(Wys.)

Waga

26kg

Zasilanie

100V-240V~, 50/60Hz



📍 Raszewy 4a, 63-210 Żerków

☎ +48 62 332 40 80

🌐 www.medivetcon.com.pl

✉ biuro@medivetcon.pl

MediVetCon